



Новое поколение весов Scout — новые стандарты взвешивания в лаборатории и на производстве

Весы OHAUS Scout с изящной, допускающей хранение стопкой конструкцией и большим ЖК-дисплеем с подсветкой идеально подходят для лаборатории и производства. Эти весы отличаются превосходной защитой от перегрузки, множеством единиц измерения и режимов взвешивания. Готовые к работе с высокой производительностью, имеющие малое время стабилизации и высокую точность результатов взвешивания, эти портативные весы устанавливают новый стандарт взвешивания в лаборатории и на производстве.

Стандартные функции и возможности.

- **Яркий ЖК-дисплей с подсветкой и управление 4 кнопками — эффективность эксплуатации и простота использования.**

В сочетании с простым управлением 4 кнопками большой дисплей весов Scout с подсветкой улучшает читаемость показаний в рабочих условиях с низкой освещенностью и облегчает просмотр результатов на расстоянии.

- **Превосходная защита от перегрузки и ударостойкая подставка платформы.**
Превосходная встроенная система защиты от перегрузки и ударостойкая подставка платформы защищают весы от ударов и перегрузки в сложных и неблагоприятных условиях.
- **Повышенная производительность и более высокое значение НПВ — более широкая область применения.**
Время стабилизации не более 1 секунды и передовая технология взвешивания обеспечивают более высокую производительность в лаборатории или на производстве. Более высокое значение НПВ расширяет область применения весов.

Портативные весы Scout®

Улучшенный интерфейс, яркий ЖК-дисплей с подсветкой и управление 4 кнопками

Недостаточное освещение не является проблемой с новыми весами Scout. Большой, яркий ЖК-дисплей с подсветкой улучшает читаемость показаний в условиях плохой освещенности и облегчает считывание результатов взвешивания на расстоянии. 4 четко обозначенные кнопки облегчают управление и позволяют быстро и просто выполнить настройку весов, изменить единицы измерения, выполнить калибровку и многое другое.



Превосходная система защиты гарантирует продолжительный срок службы

Превосходная система защиты от перегрузки, рассчитанная на 10-кратное превышение НПВ весов, высокопрочная платформа из нержавеющей стали, ударостойкая подставка платформы и встроенный замок для транспортировки/хранения весов Scout обеспечивают долговечность, которую принято ожидать от изделий OHAUS. Вдобавок к знаменитой долговечности нашей продукции, весы Scout можно хранить стопкой при использовании дополнительного кожуха для складирования и хранения, который также защищает весы, когда они не используются.



Самые универсальные весы в своем классе

Весы Scout предоставляют непревзойденную точность, эффективность и возможности! Время стабилизации не более 1 секунды означает повышенную производительность на любом производстве или в лаборатории. Более высокая разрешающая способность позволяет рассчитывать на чрезвычайно точные и воспроизводимые результаты взвешивания. Кроме того, более высокое значение НПВ весов Scout позволяет расширить область их применения.



Модель с защитным кожухом

Оригинальный защитный кожух Scout (только модели с дискретностью 1 мг) имеет легко снимаемую верхнюю крышку. Кожух служит в качестве ветрозащитного кольца, которое поддерживает стабильность взвешивания в неблагоприятных окружающих условиях, сохраняя высокую скорость взвешивания.



Встроенные режимы взвешивания

- **Простое взвешивание** — определение массы предметов на платформе в выбранных единицах измерения.
- **Подсчет количества** — подсчет количества предметов на платформе при помощи эталонной массы.
- **Процентное взвешивание** — определение массы образца в процентах предварительно заданной эталонной массы.
- **Контрольное взвешивание** — сравнение массы образца с заданными предельными значениями.
- **Суммирование** — определение общей массы нескольких предметов. Общая масса может превышать НПВ весов.
- **Фиксация показаний дисплея** — ручное удержание последней стабильной массы или первого наивысшего стабильного значения массы на дисплее.



Защитный кожух
 Защищает образец от внешних воздействий, повышая скорость взвешивания и воспроизводимость результатов



Подключаемые устройства
 Расширенные варианты подключения, включая RS232, USB-хост, USB-интерфейс и Ethernet



Крюк для взвешивания под весами
 Встроенный крюк для взвешивания под весами позволяет определять плотность или рассчитывать удельный вес



Гнездо для защитного устройства
 Гнездо для установки "противоугонного" устройства, предотвращающего кражу




Большой ЖК-дисплей с подсветкой
 Высококонтрастный ЖК-дисплей ясно отображает массу и результаты взвешивания даже в условиях плохой освещенности



Блокирующий переключатель
 Весы Scout можно зафиксировать в определенной конфигурации при помощи блокирующего переключателя

Габаритные размеры

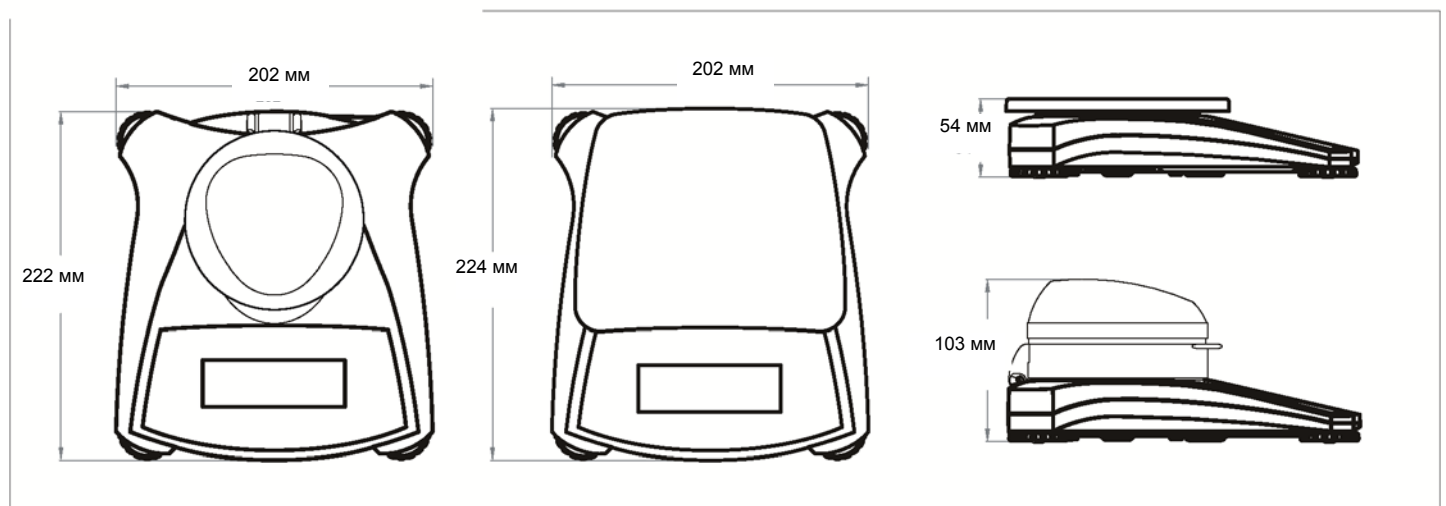

Портативные весы Scout®

Модель	SPX123	SPX223	SPX222	SPX422	SPX622	SPX1202	SPX2202	SPX421	SPX621	SPX2201	SPX6201	SPX8200
НПВ (г)	120	220	220	420	620	1200	2200	420	620	2200	6200	8200
Дискретность (г)	0,001	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	1
Воспроизводимость (СКО) (г)	0,002	0,002	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1	1
Нелинейность (г)	0,003	0,003	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,1	0,1	0,1	0,2	1
Гири для калибровки диапазона*	100 г	200 г	200 г	200 г	300 г	1 кг	2 кг	200 г	300 г	2 кг	5 кг	8 кг
Гири для калибровки линейности	50, 100 г	100, 200 г	100, 200 г	200, 400 г	300, 600 г	500 г, 1 кг	1 кг, 2 кг	200, 400 г	300, 600 г	1 кг, 2 кг	3 кг, 6 кг	4 кг, 8 кг
Время стабилизации (с)	1,5	1,5	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1
Конструкция	Корпус из пластика на основе акрилонитрила-бутадиена-стирола (АВС), платформа из нержавеющей стали											
Защитный кожух	Да			Нет								
Калибровка	Внешняя калибровка диапазона и линейности с внешней калибровочной гирей / цифровая калибровка с внешней калибровочной гирей (выбирает пользователь)											
Диапазон тарирования	До НПВ											
Единицы измерения**	г, кг, карат, Н, унция, тройская унция, пеннивейт, фунт, фунт:унция, гран											
Режимы взвешивания	Простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, суммирование, фиксация показаний дисплея											
Требования к электропитанию	Адаптер переменного тока (входит в комплект) или 4 батареи размера AA (не входят в комплект)											
Типичное время работы от аккумулятора (часы)	80		120		80			120		80		120
Подключаемые устройства	RS232, USB-хост, USB-устройство или Ethernet (интерфейсы поставляются как принадлежность)											
Тип дисплея	Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) с подсветкой											
Размер дисплея	Цифры — 20 мм											
Предельно допустимая перегрузка	В 10 раз больше НПВ											
Диапазон рабочих температур	От 10 °С до 40 °С при относительной влажности от 10 до 80 %, без конденсации											
Условия хранения	От -20 °С до 55 °С при относительной влажности от 10 до 90 %, без конденсации											
Размеры платформы (Ш x Г)	Ø 93 мм		Ø 120 мм			170 x 140 мм		Ø 120 мм		170 x 140 мм		
Размеры весов (Ш x Г x В)	202 x 222 x 103 мм		202 x 224 x 54 мм									
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	300 x 250 x 129 мм		300 x 250 x 86 мм									
Собственная масса	1 кг											
Масса в упаковке	1,5 кг											

* Калибровочные гири поставляются с моделями, имеющими НПВ до 620 г включительно

** Доступные настройки единиц измерения веса зависят от страны и локальных регулирующих законов и норм

Прочие стандартные функции и оборудование

Транспортировочный замок, платформа из нержавеющей стали, переключатель блокировки меню и калибровки, нескользящие регулируемые опоры, пузырьковый уровень, механическая и программная защита от перегрузки/недогрузки, индикатор стабильности, автоматическое тарирование, индикатор разряда батареи, автоматическое выключение, настройки печати и связи по выбору пользователя

Соответствие стандартам

- Безопасность изделия: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 № 61010-1; стандарт UL № 61010-1
- Электромагнитная совместимость: IEC/EN 61326-1, класс В; FCC часть 15, класс В; Industry Canada ICES-003 класс
- Весы сертифицированы в России и ряде стран СНГ

Принадлежности

Комплект интерфейса RS232	30268982	Кабель для принтера SF40	12122603
Комплект интерфейса USB-хост	30268983	Картридж для принтера SF40	12120798
Комплект USB интерфейса	30268984	Бумага для принтера SF40 (2 рулона)	12120799
Комплект интерфейса Ethernet	30268986	Комплект дополнительного дисплея	30269019
Кожух для складирования и хранения (6 шт.)	30268987	"Противоугонное" устройство	80850043
Кожух для складирования и хранения (1 шт.)	30268988	Комплект для загрузки сверху для определения плотности	30269020
Принтер этикеток Т4	30057588	Футляр для переноски	30269021
Бумага для принтера Т4	30103961	Защитный чехол	30269022
Принтер, ударный, SF40A.....	30045641		

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

